


# Dental Glass Catalog

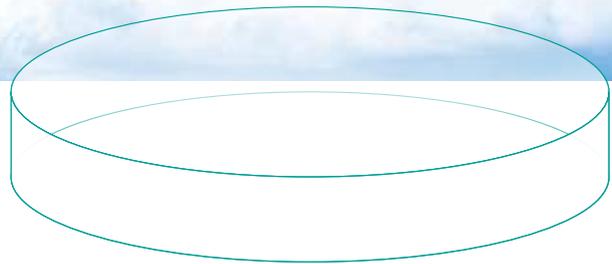

# Dental Glass Catalog

## Contents


G-60/A 【耐熱】 シャーレ	2
G-60/B 【耐熱】 三割シャーレ	2
G-61 【耐熱】 シャーレ75	3
G-00 薬瓶	4
G-03 スポイト薬瓶	4
G-04 ネジ付薬瓶：スポイト(オーバーキャップ付)	4
G-05 ネジ付薬瓶：ハケ(オーバーキャップ付)	4
G-1(大)・G-2(小) 有帽瓶	5
G-3 ダッペングラス	5
G-17/C(大)・G-17/D(小) シャーレ	5
G-17/A(大)・G-17/B(小) 三割シャーレ	5
G-10/A2(大)・G-10/A1(小) アルコールランプ	6
G-10/B2(大)・G-10/B1(小) ランプ&トレイ	6
G-50 四本瓶台	7
G-31 六本瓶台	7
G-52 三本立ステンレス薬瓶台 S.S.3	7
G-48 五本立ステンレス薬瓶台 S.S.5	7
G-51 スポイト薬瓶・ディッシュセット	8
G-51 六本立ステンレススタンド	8
G-16 角シャーレ	8
G-49 枠付シャーレ	8
G-24 三寸フタモノ(深口シャーレ)	9
G-47 万能ツボ	9
G-8 ガラス練板	9
G-9 三角板	9
G-5 コーク型乳鉢・乳棒	10
G-4 ホワイト型乳鉢・乳棒	10
G-21 瓢瓶	10
G-45 滴瓶	10
G-40 シカン瓶	11
G-41 2本掛シカン瓶スタンド	11
G-3D ディッシュ	11

## G-60/A 【耐熱】 シャーレ




シャーレ寸法

本 体 (mm)	
外 径	90
内 径	84
厚 さ	3
高 さ	20

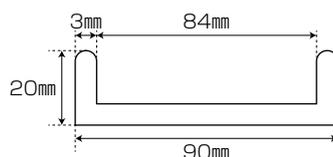

フタ寸法

本 体 (mm)	
外 径	95
内 径	91
厚 さ	2
高 さ	17

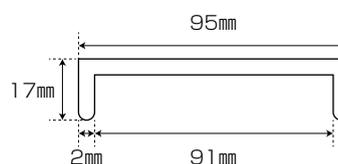



## G-60/B 【耐熱】 三割シャーレ



三割シャーレ寸法

本 体 (mm)	
外 径	90
内 径	84
厚 さ	3
高 さ	21
内 壁 厚 さ	7
内 壁 高 さ	12

(フタは上記と同じ)

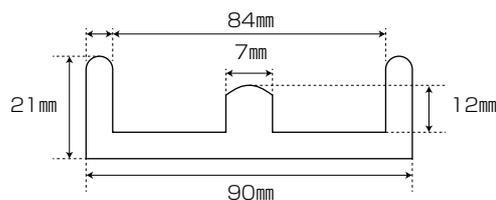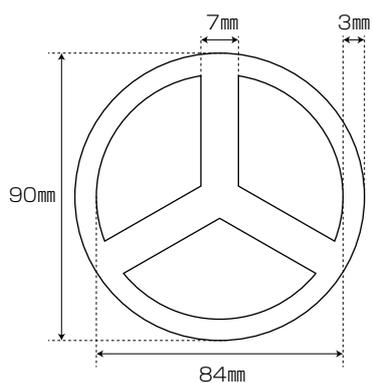


## G-61 【耐熱】 シャーレ75




### シャーレ寸法

本 体		(mm)
外 径		75
内 径		70
厚 さ		2.5
高 さ		22

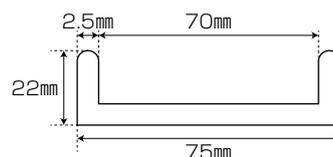

### フタ寸法

本 体		(mm)
外 径		81
内 径		77
厚 さ		2
高 さ		17

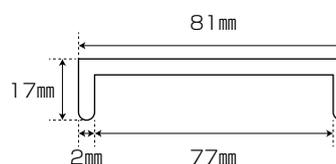

## ◆特徴

- 通常のガラスより熱に強い材質で成型しています。これにより132℃の高熱滅菌（乾燥工程は除く）にて使用できます。

## ◆使用上の注意

- 高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）で使用する際は滅菌工程のみで使用してください。乾燥工程での使用はお控えください。
- 強化ガラスとは異なります。普通のガラスよりも熱に強いガラスです。衝撃に対する強度は普通のガラスと変わりません。
- 使用上、欠けや破損した場合、その状態で滅菌器にかけるとその場所から破損が広がる恐れがあります。このような状態が発生した場合は使用をお控えください。
- ガラスが変形することがありますが、耐熱性能に変化はありません。
- 乾熱滅菌器には対応しておりません。

## G-00 薬瓶



カラー	茶・ブルー・乳白・グリーン・白
寸法 (mm)	W27 x D27 x H53
内容量	8cc
重量	44g

歯科診療に必要な薬品の使用を容易にするため、薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。

## G-03 スポイト薬瓶



カラー	茶・ブルー・白
寸法 (mm)	W27 x D27 x H71
内容量	9cc
重量	29g
スポイトゴム材質	シリコン

スポイト及びゴム部分は滅菌器に対応しております。空気抜きの為、瓶の淵に切込みが入っています。揮発性や臭気の強い液体を入れる場合はネジ付き薬瓶の使用をお勧めします。

※スポイト部のみの販売はありません。

## G-04 ネジ付薬瓶：スポイト（オーバーキャップ付）



カラー	茶・ブルー・白
寸法 (mm)	W27 x D27 x H68
内容量	9cc
重量	29g
スポイトゴム材質	シリコン

スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても蒸発や臭いを防止出来ます。

※スポイト部のみの販売はありません。

## G-05 ネジ付薬瓶：ハケ（オーバーキャップ付）



カラー	茶・ブルー・白
寸法 (mm)	W27 x D27 x H68
内容量	9cc
重量	27g
ハケ材質	ナイロン

ハケ部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても蒸発や臭いを防止出来ます。

※ハケ部のみの販売はありません。

**G-1(大)・G-2(小) 有帽瓶**



	〈大〉	〈小〉
カ ラ ー	茶・ブルー・乳白・グリーン・白	
内 容 量	30cc	9cc
寸 法 (mm)	49φ x H73	33φ x H48
重 量	108g	48g

歯科診療に使用する蓋付薬瓶で、大小2種類あります。

**G-3 ダッペングラス**



カ ラ ー	茶・ブルー・乳白・グリーン・白
寸 法 (mm)	35φ x H33
重 量	41g

**G-17/C(大)・G-17/D(小) シャーレ**




〈大〉			〈小〉	
寸法 (mm)	重量		寸法 (mm)	重量
87 x H28	195g	セット	69 x H22	95g
87 x H17	105g	フ タ	69 x H15	48g
77 x H23	90g	本 体	60 x H17	47g

**G-17/A(大)・G-17/B(小) 三割シャーレ**



〈大〉			〈小〉	
寸法 (mm)	重量		寸法 (mm)	重量
87 x H28	210g	セット	69 x H22	107g
87 x H17	105g	フ タ	69 x H15	48g
77 x H23	105g	本 体	60 x H17	59g

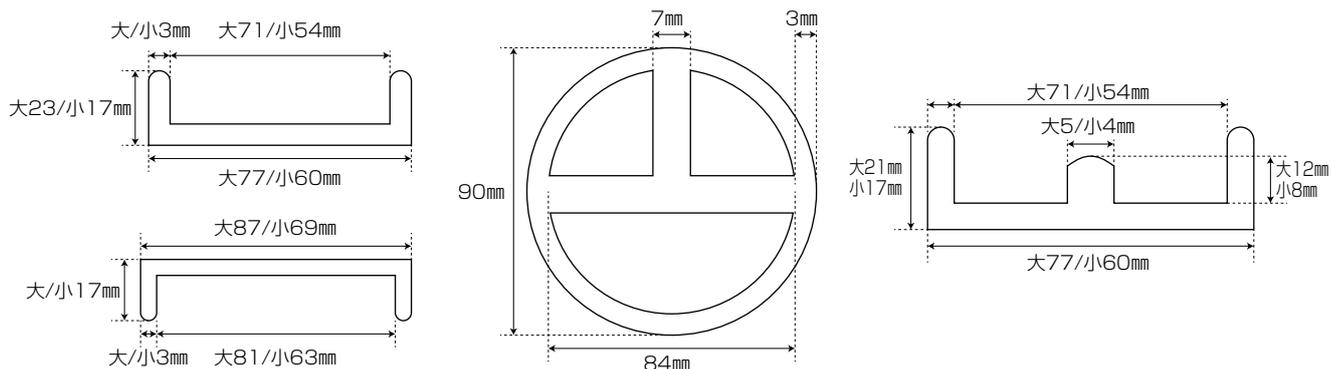

## G-10/A2(大)・G-10/A1(小) アルコールランプ



〈大〉		〈小〉	
90cc	内 容 量	30cc	
74φ × H100	寸 法 (mm)	62φ × H86	
197g	重 量	150g	

※アルコール用ランプの芯とガイシ（芯立て）は1個より販売しております。

芯は大小共通で1種類となります。

## G-10/B2(大)・G-10/B1(小) ランプ&トレー



〈大〉		
内 容 量		90cc
寸 法 (mm)		重 量
本 体	74φ x H100	197g
ト レ ー	78φ x H5	23g
ス タ ン ド	W60 x D76 x H54	50g

〈小〉		
内 容 量		30cc
寸 法 (mm)		重 量
本 体	62φ × H86	150g
ト レ ー	66φ × H5	23g
ス タ ン ド	W50 x D61 x H38	50g

アルコールランプ本体にエプロントレーを儲け、ワックス溶解作業その他から本体を保護します。スタンド及びトレーの材質はステンレスです。

ステンレス金具のみの販売もしております。ご注文の際は「ランプ&トレー大(小) 瓶無し」とご用命ください。

### ⚠️ アルコールランプ使用上のご注意 ⚠️

1. 燃料用アルコールのみ使用してください
2. アルコールの容量は瓶の肩口以下にする。入れすぎると瓶の口元からランプの芯立（ガイシ）を通し染み出し引火する恐れがあります。
3. 芯は芯立（ガイシ）より5ミリ以上出さないでください。出し過ぎますと、余分なアルコールが気化せずに流れ出し引火する恐れがあります。
4. アルコールランプの消化の際、フタをかぶせて火を消しますが、そのままの状態にしておきますとフタの内部にガスが溜まり、爆発しフタを飛ばすことがあります。消化後はフタを天地逆にしてガス抜きをして下さい。
5. ガラス瓶本体にワックスなどの引火しやすい物を付着したままにせず、常時清潔にしてご使用ください。
6. 可燃性の物や燃えやすい物の近くではアルコールランプを使用しないで下さい。引火する恐れがあります。
7. 使用後は必ずフタをしてください。
8. 燃料が少ない（目安：3分の1以下）と瓶の内部でアルコールの蒸気と空気の混じった可燃性ガスが生じ引火、爆発の恐れがあります。

**G-50 四本瓶台**

寸法 (mm)	W93 x D83 x H26
重 量	190g

歯科治療に使用する種々の薬液を入れた薬瓶を植立させておくスタンドです。乳白色ガラス製です。  
※薬瓶は付属しません。

**G-31 六本瓶台**

寸法 (mm)	W215 x D45 x H25
重 量	318g

歯科治療に使用する種々の薬液を入れた薬瓶を植立させておくスタンドです。乳白色ガラス製です。  
※薬瓶は付属しません。

**G-52 三本立ステンレス薬瓶台 S.S.3**

寸法 (mm)	W85 x D50 x H60
重 量	140g
セット内容	三本立ステンレス薬瓶台 x 1
	薬瓶 x 3 (茶・ブルー・白)
	デルリンリング x 3 ※スタンドにセット済

薬瓶のフタが片手で操作でき、スタンド上部に収納され場所をとりません。薬瓶は理想の角度を保持しネジの調節で取り外しが簡単にでき、スタンドはオートクレーブ対応。ステンレス製。

※SS3用薬瓶台、デルリンリングは1個より販売しております。

**G-48 五本立ステンレス薬瓶台 S.S.5**

寸法 (mm)	W142 x D50 x H65
重 量	218g
セット内容	五本立ステンレス薬瓶台 x 1
	S.S.5専用薬瓶 x 5 (茶・ブルー・乳白・グリーン・白)
	デルリンリング x 5 ※スタンドにセット済

薬瓶のフタが片手で操作でき、スタンド上部に収納され場所をとりません。薬瓶は理想の角度を保持しネジの調節で取り外しが簡単にでき、スタンドはオートクレーブ対応。ステンレス製。通常の薬瓶もセット出来ます。

※SS5用薬瓶台、専用薬瓶、デルリンリングは1個より販売しております。

### G-51 スポイト薬瓶・ディッシュセット



寸法 (mm)	W134 x D94 x H17
重 量	93g
セット内容	六本立ステンレススタンド x 1
	スポイト薬瓶各色 (茶・ブルー・白)
	ディッシュ (3個入り) x 2

スタンドはオートクレーブ対応。ステンレス製。

### G-51 六本立ステンレススタンド



寸法 (mm)	W134 x D94 x H17
重 量	93g

前列にダップングラス・有帽瓶(小)・ディッシュ、後列に薬瓶・スポイト薬瓶がセットできます。

オートクレーブ対応。ステンレス製。

※上記写真はセット例です。ステンレススタンド単体の販売となります。

### G-16 角シャーレ



寸法 (mm)	W80 x D57 x H25
重 量	92g

### G-49 枠付シャーレ




カ ラ ー	茶・白
寸法 (mm)	93 x H63
重 量	400g

**G-24** 三寸フタモノ (深口シャーレ)

カラー	茶・白	
	寸法 (mm)	重量
セット	91 x H52	374g
フタ	91 x H25	157g
本体	89 x H40	217g

**G-47** 万能ツボ

カラー	茶・白	
容量	寸法 (mm)	重量
500ml	93φ x H113	460g
250ml	81φ x H94	300g
100ml	64φ x H81	190g
30ml	40φ x H47	60g

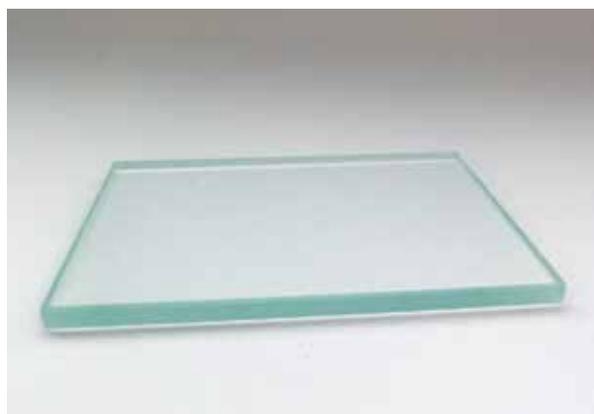**G-8** ガラス練板

品名	寸法 (mm)	重量
大板 厚	W150 x D75 x H15	450g
大板 並	W150 x D75 x H10	280g
中板	W120 x D75 x H 5	110g
小板	W 90 x D60 x H 5	65g

**G-9** 三角板

寸法 (mm)	W117 x D63
重量	88g

### G-5 コーク型乳鉢・乳棒



	寸法 (mm)	重量
乳 鉢	48 x H35	83g
乳 棒	17 x H95	30g

### G-4 ホワイト型乳鉢・乳棒



	寸法 (mm)	重量
乳 鉢	52 x H33	100g
乳 棒	17 x H95	30g

乳鉢、及び乳棒のみ単品での販売もしております。

### G-21 瓢瓶



カ ラ ー	茶・グリーン
寸法 (mm)	83 x H89
重 量	285g

### G-45 滴瓶



カ ラ ー	茶・白
寸法 (mm)	W59 x D118
重 量	87g
容 量	30cc

**G-40** シカン瓶

カ ラ ー	茶・ブルー・グリーン・白
寸法 (mm)	54φ x H122
重 量	132g

**G-41** 2本掛シカン瓶スタンド

寸法 (mm)	W130 x H230
重 量	470g

※シカン瓶は付属しません。

**G-3D** ディッシュ

カ ラ ー	茶・ブルー・白
寸法 (mm)	34φ x H21
重 量	35g

3個1セットでの販売となります。  
基本セットは各色一個ずつですが、ご希望があれば同一色のみのもので組み合わせ等も承ります。

## 弊社商品の消毒・殺菌方法について

弊社のガラス製品は一部を除き普通の並ガラス製です。急高温、急冷却などの急激な温度変化には対応できず破損の原因となります。

その為オートクレーブ、乾熱滅菌機に対応しておりません。ガラスが剥がれるように割れてしまったり、ヒビが入ってしまいます。また、乾燥工程を除いた滅菌処理のみでも弊社では保障しかねます。

滅菌には薬液滅菌・ガス滅菌・煮沸滅菌をお願い致します。なお、薬液滅菌の際の薬液の種類は問いません。

また、煮沸滅菌の場合は、徐々に温度を上げ徐々に温度を下げる方法を用いてください。

※G-60/A【耐熱】 シャレー、G-60/B【耐熱】 三割シャレー、G-61【耐熱】 シャレー75、一部ステンレス製品、スポイト及びスポイトゴムははオートクレーブに対応しております。

## 遮光性について

弊社取扱の製品では遮光性の高い色から順に、「グリーン>茶>ブルー>乳白>白（透明）」となります。

## ガラス製品の破損の原因と状態について

1. 刃物で切ったような状態 - ガラス製品自体に歪みが残っていた
2. 小さな欠け、破損状態 - 過度の加重がかかり破損
3. 原型をとどめない状態 - 落下及び衝撃
4. その他

以上のような原因が考えられます。

但し、ガラス製品においてはガラスの性質上破損の的確な原因の究明は困難な場合が多いため、充分なご注意をもって使用いただきたいと思います。

- 当社の製品は全てオープンプライスです。
- ガラス製品の寸法、重量、内容量は、製造上多少の誤差がありますのでご了承ください。
- 製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更させていただく場合があります。
- カタログに掲載されていない製品はお問い合わせください。

## 株式会社 堀内 製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目21番6号  
電話 03(3652)4945  
FAX 03(3652)4911  
<http://horiuchiseisakujo.co.jp>

